


RiseAtlas450T™

SystemRoMedic™

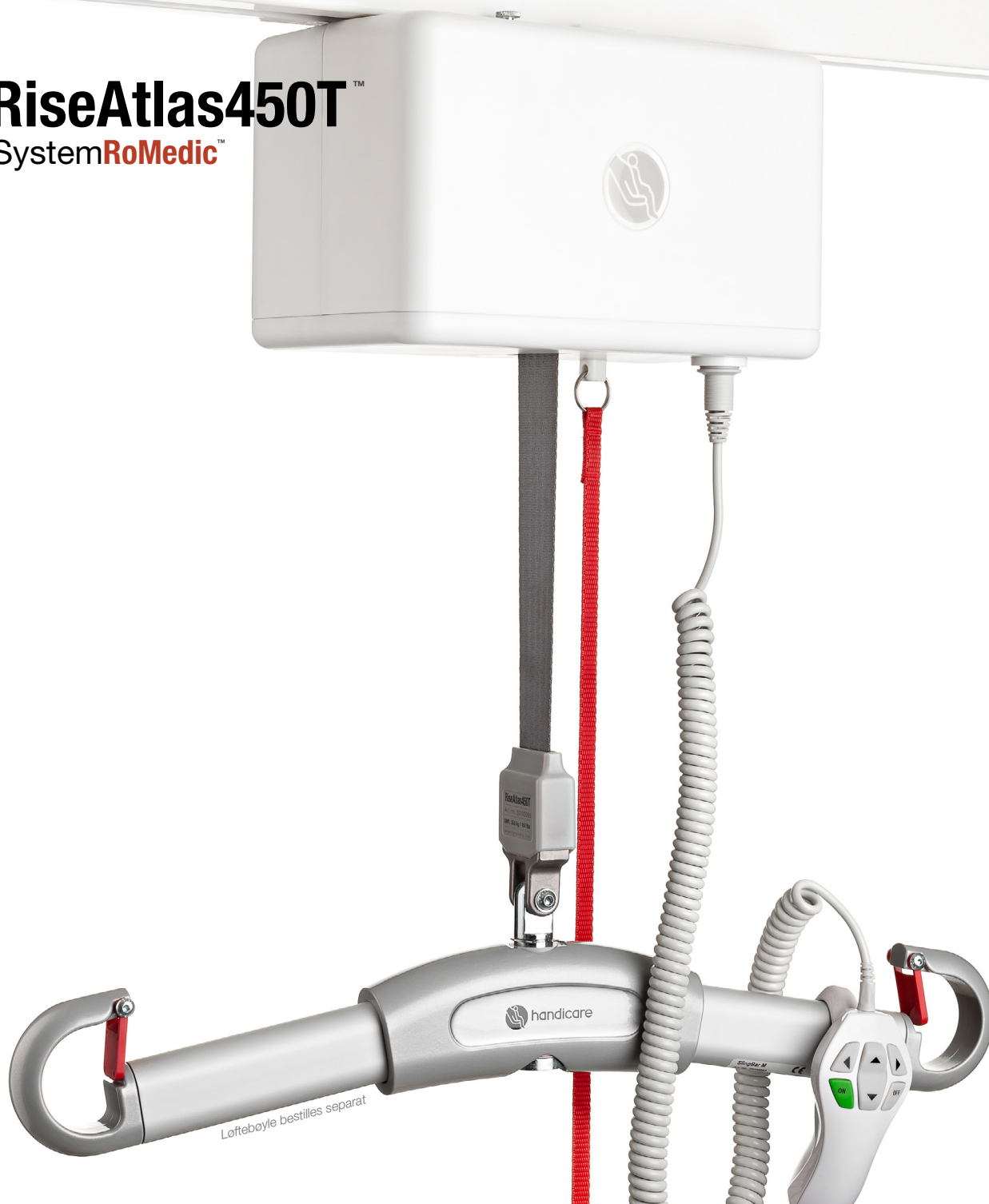

Ubegrensede løfteløsninger - for brukere som veier opp til 205 kg

- Maks brukervekt 205 kg
- Kjøremotor for fremdrift i skinnen
- Moderne, elegant og hygienisk design
- Oppsiktsvekkende liten og ekstremt lav vekt
- For alle skinnesystemer, i alle miljøer og i alle typer rom
- Gir stort løfteområde og mulighet for meget lave og høye løft
- For alle situasjoner, brukere og behov
- Meget enkel å bruke, gir sikre arbeidsforhold og gjør det mulig for medhjelperen å være nær brukeren under hele løfteprosedyren
- Stillestående, myke bevegelser samt myk start og stopp
- Ergonomisk og brukervennlig håndkontroll
- På- og Av-knappene på håndkontrollen forebygger uregelmessig bruk av takheismotorens funksjoner
- Manuell nødstop
- Elektrisk og manuell nødosenk
- Overbelastningssensor med varsel
- Fallvern
- Motoren stanser automatisk hvis løftebåndet ikke belastes
- Nattlys
- Effektiv styring av løftebåndet forhindrer unødvendig tvinning av løftebåndet
- Miljøvennlig NiMH-batterier med høy kapasitet
- Enkel og bekvem lading via håndkontrollen
- En unik ladeløsning med en kjøremotor for to alternative lademetoder (skinnelading/endelading) finnes som tilbehør
- Diskret informasjonspanel
- Servicevennlig
- Diagnostikk; en spesiell software finnes som tilbehør og gjør det mulig, via en PC, å få tilgang til ytterligere informasjon om takheismotoren
- Mange tilbehør for sikre, enkle og individuelt tilpassede løft av brukere i de aller fleste forflytningssituasjoner

RiseAtlas450T™

For profesjonelle og meget funksjonelle omsorgsmiljøer med en harmonisk og menneskelig atmosfære.



Enkel og bekvem lading via håndkontrollen er standard

Ladestasjonen for takheismotoren er integrert i en liten, diskret holder og oppbevaringsplass for håndkontrollen. Holderen med ladestasjon monteres enkelt på veggen, i nærheten av takheisens ladestasjon.



PRODUKTSPEKIFIKASJONER

Art. nr. Produkt
50100058___ RiseAtlas450T

RiseAtlas450T leveres med håndkontroll og lader. Løftebøyle bestilles separat.

TILBEHØR

Art. nr.	Produkt	Beskrivelse
70200062	In-rail/end point charging	Skinnelading/endelading
70200047	9V battery and cable	Batteri og kabel, for nødsenk
70200048	Software for diagnostics	Software for diagnostikk
50400066	Cover to charger	Deksel for lader, for alle modeller og spesialversjoner
50400048	Parking Placard	Parkeringstavle for bekvem oppbevaring av løftebøyer, manualer og løfteseler
50400332	Parking Placard BariBar	Parkeringstavle for oppbevaring av BariBar og løfteseil.
70200071	SlingBar XS	Løftebøyle, 250 mm
70200001	SlingBar S	Løftebøyle, 350 mm
70200002	SlingBar M	Løftebøyle, 450 mm
70200003	SlingBar L	Løftebøyle, 600 mm
70200042	SlingBarSpreader M	Sidebøyer for SlingBar XS/S/M/L
70200072	BariBar	Firepunkts løftebøyle for takheismotor SWL 454 kg
70200017	Sling bar RFL X4	Firepunkts løftebøyle SWL 300 kg
70200053-		
70200058	Lift strap extension	Fortengelsesbånd, 6 lengder: 370 – 970 mm

TEKNISK INFORMASJON

Maks brukervekt: _____ 205 kg
Materiale, chassis: _____ Aluminium
Materiale, deksel: _____ Brannhemmende ABS-plast
Fysisk utvendige mål, lengde x bredde x høyde: _____ 266 x 151 x 156 mm
Egenvekt: _____ 7,5 kg
Fremdrift i skinnene: _____ Kjøremotor
Hastighet ved forflytning langs skinnen, uten vekt: _____ 140 mm per sek
Hastighet ved forflytning langs skinnen, med vekt: _____ 120 mm per sek
Håndkontroll: _____ Elektrisk, 6 knapper
Løftehøyde: _____ 2400 mm
Løftehastighet, uten vekt: _____ 50 mm per sek
Løftehastighet, med vekt: _____ 39 mm per sek
Lydnivå, med vekt: _____ 55 dB(A)
Effektiv styring av løftebånd: _____ Standard
Nødsenk: _____ Elektrisk og manuell
Nødstop: _____ Manuell
Nattlys: _____ Standard
Batteri: _____ NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh
Håndkontrollslading: _____ Standard
Konstant skinnelading: _____ Valgfritt, tilbehør
Ladestasjon i skinne: _____ Valgfritt, tilbehør
IP-klasse, løftemotor: _____ IP20
IP-klasse, håndkontroll: _____ IPX4



RiseAtlas450T oppfyller kravene til medisinsk utstyr, klasse 1-produkter 93/42/EEC.

Besøk www.handicare.no for mer informasjon.

SystemRoMedic™ er en helhetsløsning for enkle forflytninger. I konseptet inngår det fire produktområder som dekker de aller fleste behov i ulike forflytningssituasjoner.

Overflytting, mellom to enheter. **Posisjonering**, innenfor samme enhet.

Støtte, ved mobilisering. **Løft**, manuelle og mekaniske.



handicare

Handicare AS
Vålerveien 159, 1599 Moss
Postboks 163, 1501 Moss
Telefon: +47 03250
Telefaks: +47 85 02 88 22
www.handicare.no
post@handicare.no